


HOW TO USE THE PROSTATE TREATMENT INSTRUMENT ?


STEP ONE: Turn on the prostate treatment instrument POWER switch , the default treatment time is 45 mins .
¿CÓMO USAR EL INSTRUMENTO DE TRATAMIENTO DE PRÓSTATA?

PASO UNO: Encienda el interruptor POWER del instrumento de tratamiento de próstata, el tiempo de tratamiento predeterminado es de 45 minutos.

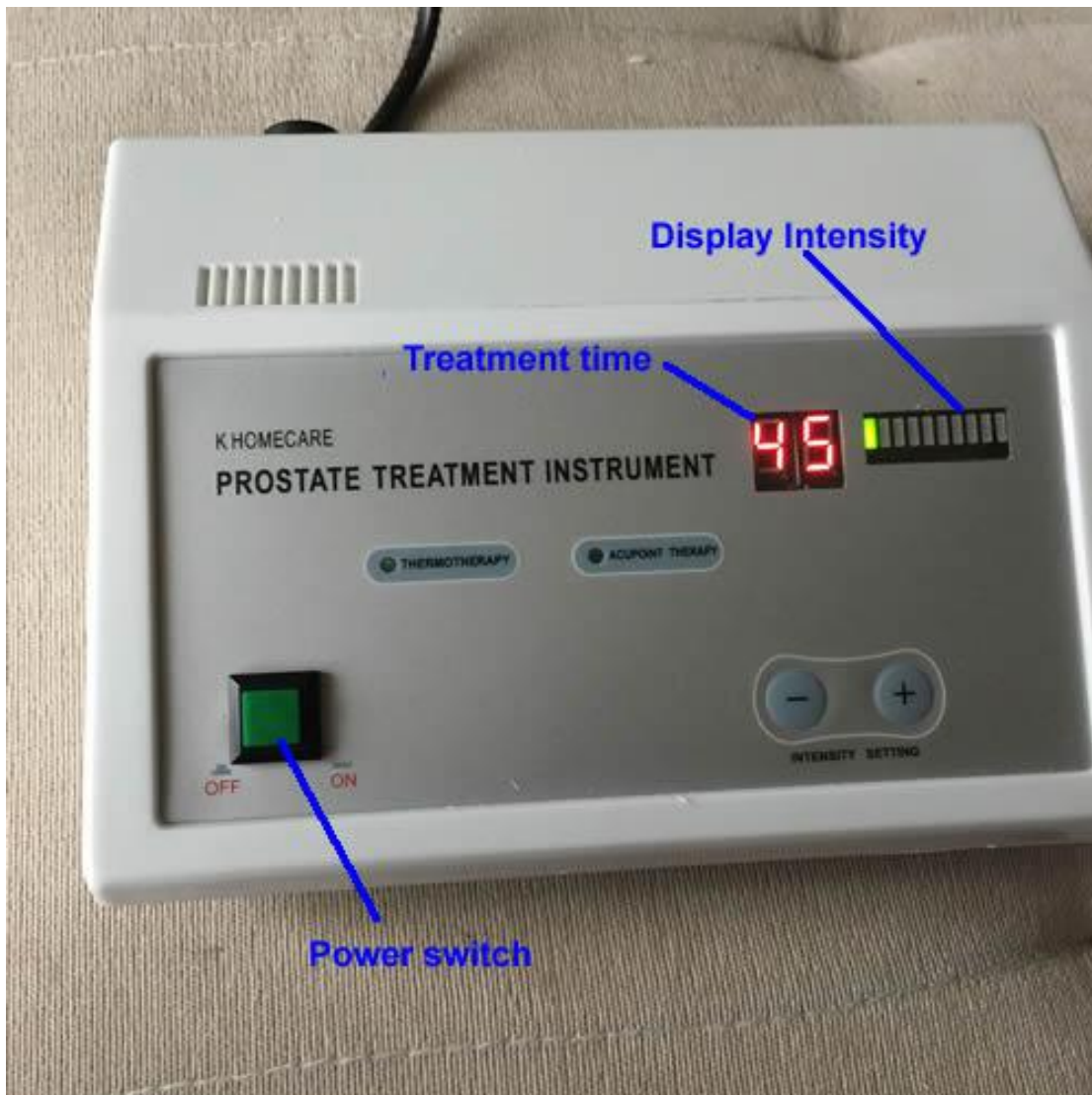

STEP TWO:


1.) make the rectangle and round electrode connect to the wire
2. SEGUNDO PASO:
3. 1.) hacer que el rectángulo y el electrodo redondo se conecten al cable

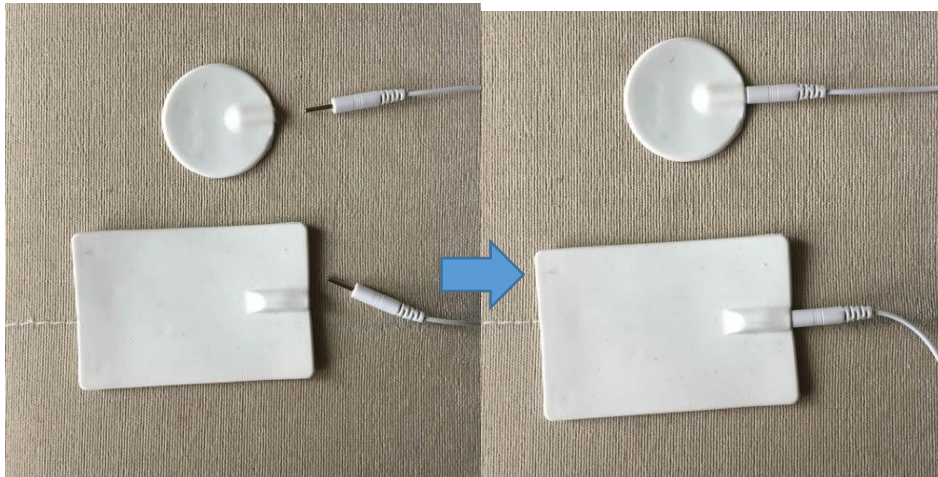

2.) Putting the rectangle electrode on the QIHAI ACUPOINT


2.) Poner el electrodo rectangular en la QIHAI ACUPOINT




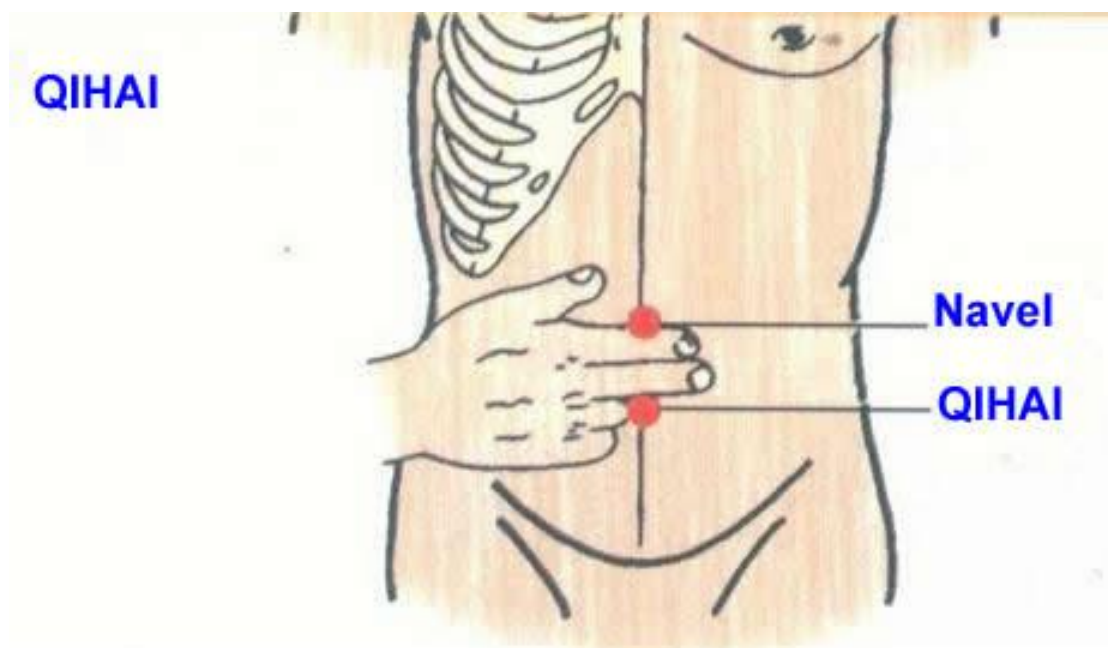

3.) Putting the round electrode at the QUGU acupoint **OR** Huiyin Acupoint


3.) Colocar el electrodo redondo en el punto de acupuntura de QUGU O en el punto de acupuntura de Huiyin

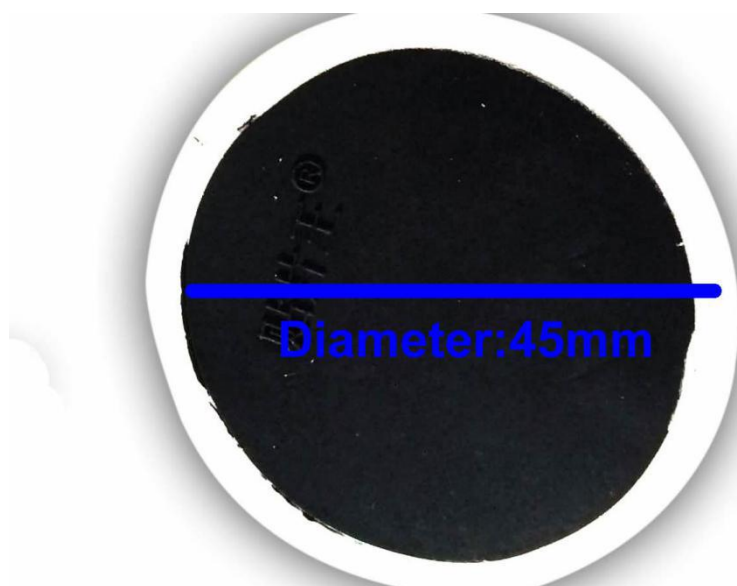

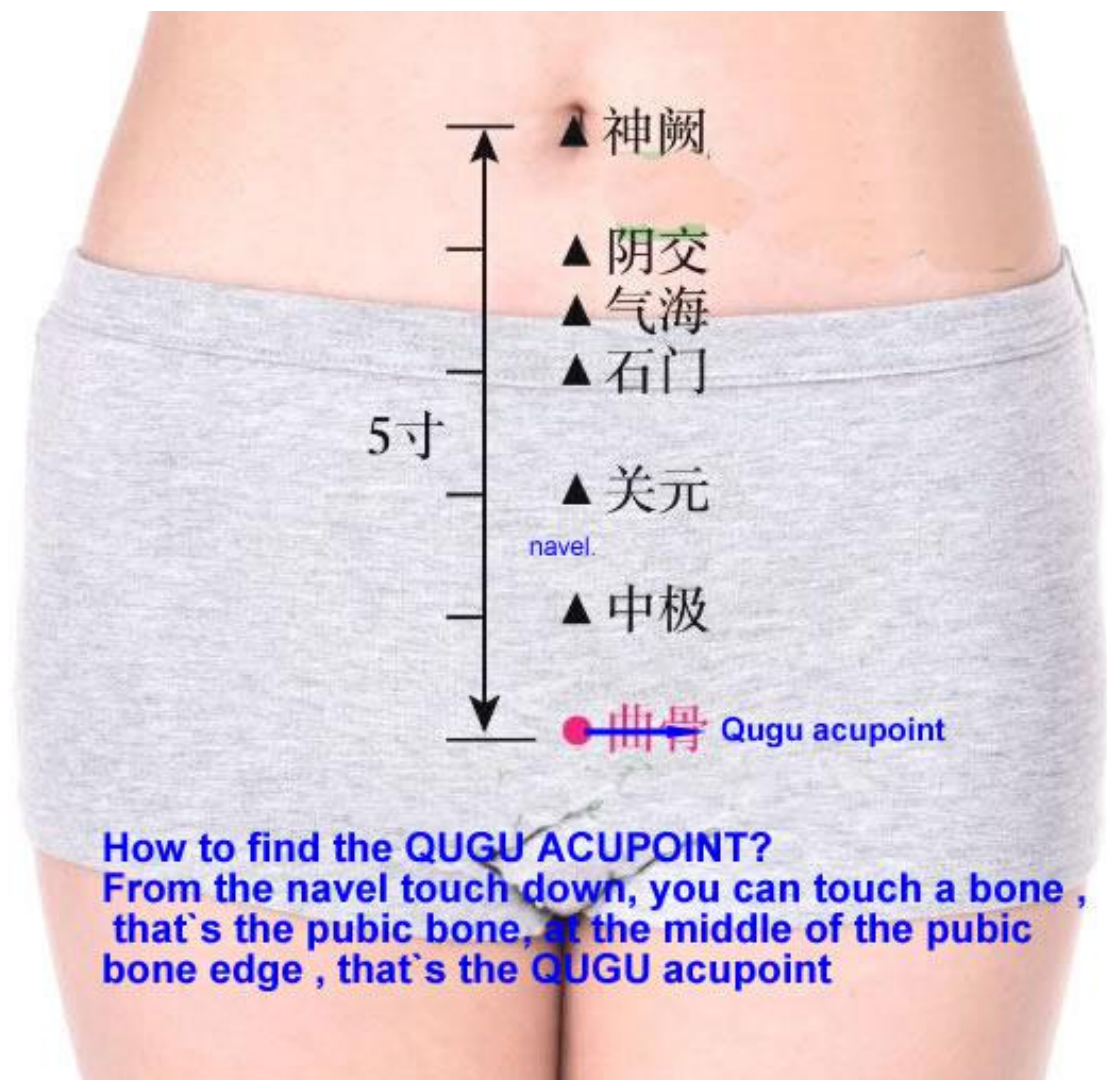


How to find the Huiyin Acupoint?

¿Cómo encontrar el Huiyin Acupoint?

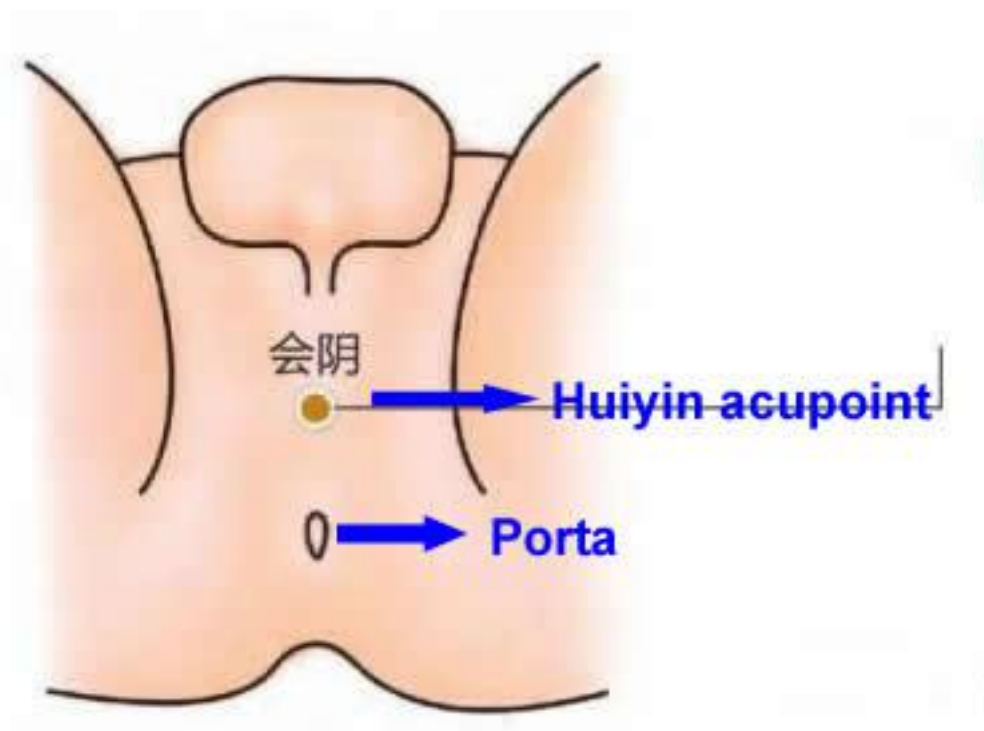

then fixed with elastic pants , and insert the wire into the jack of the machine
luego se fija con un pantalón elástico e inserta el cable en el gato de la máquina

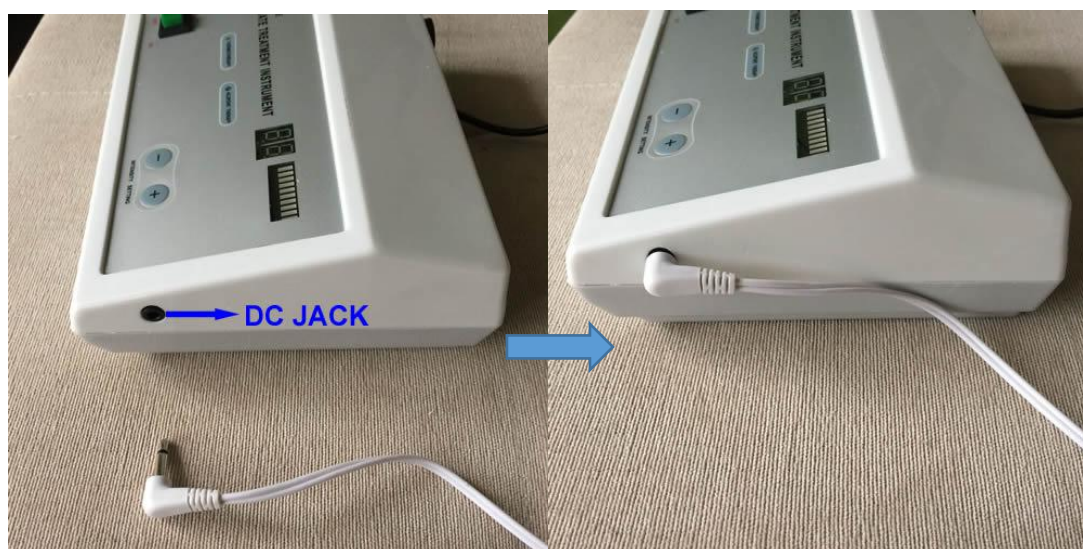

STEP THREE:

Adjust the treatment intensity , press “+” , then the treatment time begin to count down , we can increase the intensity until we can suffer it. Treatment 5 minutes , when our body suit the intensity , we can increase the intensity . We should adjust the intensity high or low from time to time, to be sure it's the maximum intensity which we can suffer it . Because everyone`s sensitive are difference.

If you are the sensitive skin type , and the output intensity can't be increase, then the treatment time should extend , until the treatment acupoint fever

Ajuste la intensidad del tratamiento, presione "+", luego el tiempo de tratamiento comienza a contar hacia atrás, podemos aumentar la intensidad hasta que podamos sufrirlo. Tratamiento 5 minutos, cuando nuestro cuerpo se adapte a la intensidad, podemos aumentar la intensidad. Deberíamos ajustar la intensidad alta o baja de vez en cuando, para asegurarnos de que sea la intensidad máxima que podemos sufrir. Porque todos los sensibles son la diferencia.

Si usted es del tipo de piel sensible, y la intensidad de salida no puede aumentar, entonces el tiempo de tratamiento debe extenderse, hasta que el tratamiento acida la fiebre



STEP Four: when the treatment time is finished , the time show is “00” , the machine buzzer prompts the treatment is over , and the output strength to zero.

STEP FIVE : When the the treatment is over, BE SURE NO OUTPUT , then take off the elastic shorts , and remove the electrode .

STEP SIX :Finally , turn off the power switch.

PASO CUATRO: cuando finaliza el tiempo de tratamiento, el espectáculo de tiempo es "00", el zumbador de la máquina indica que el tratamiento terminó y la potencia de salida a cero.

PASO CINCO: Cuando finalice el tratamiento, ASEGÚRESE DE QUE NO HAYA SALIDA, luego quítese los pantalones cortos elásticos y retire el electrodo.

PASO SEIS: Finalmente, apague el interruptor de encendido.

Product size and clinical results as following:

Tamaño del producto y resultados clínicos de la siguiente manera:



Clinical study:

Symptom		After 5 times treatment	After 10 times treatment	Effective case ratio		inefficiency case ratio		inefficiency case ration	
Obstruction of urination	35	15	5	26	74.3	5	14.3	4	11.4
Urination simulation	45	10	3	35	78.0	7	16.0	3	6.0
Pelvic pain	24	10	2	17	70.8	5	20.8	2	8.4
Unconscious urination	4	2	1	2	50.0	1	25.0	1	25.0
Comprehensive evaluation	108			80	74.0	18	17.0	10	9.0